QUICKTIP

Wykrywanie upadku i powiadomienia


Konfiguracja systemu

Użytkownik

Upewnij się, że Automatyczne powiadomienia i/lub powiadomienia manualne są włączone w aparatach słuchowych przez Twojego protetyka słuchu.


1. **Uruchom aplikację Thrive**: w celu uzyskania więcej informacji zobacz instrukcję typu QuickTIP dotyczącą konfiguracji aplikacji Thrive Hearing Control. Funkcja Powiadomienia o upadku jest dostępna zarówna dla aplikacji w wersji zaawan-sowanej jak i podstawowej.



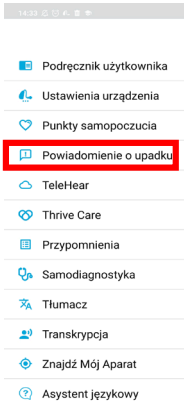

2. Upewnij się, że jesteś zalogowany przez konto w gogle/facebook/ itp. Użycie funkcji Powiadomienia o upadku wymaga zalogowania w chmurze.

3. Wybierz **Ustawienia > Powiadomienie o upadku,** aby rozpocząć konfigurację.

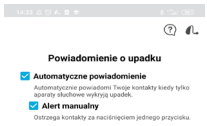

4. Automatyczne powiadomienia lub powiadomienia manualne będą zaznaczone, jeśli są włączone przez Twojego protetyka słuchu. Dotknij Rozpocznij konfigu-rację powiadomienia u upadku.




5. Wyświetl sygnały tonowe dla powiadomień. Dotknij każdego z komunikatów, aby odsłuchać w celu zapoznania się z sygnałami.







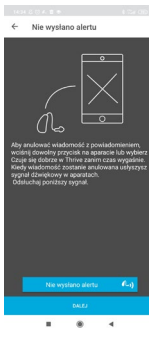




Audibel logo, Audibel, Thrive and Arc are trademarks of Audibel Laboratories, Inc. Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. andother countries. Android is a trademark of Google LLC.
©2021 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 8/21 FLYR3875-00-EE-AB

Użytkownik (ciąg dalszy)

6. Wprowadź swoje informacje profilowe. Informacje profilowe będą już dostępne, jeśli zostały wcześniej wpisane do aplikacji Thrive.


7. Wprowadź swoje imię, jeśli chcesz, żeby pojawiło się w wiadomości alarmowej wysyłanej do Twoich kontaktów. Przykładowa wiadomość powiadomienia jest wyświetlona dla podglądu.

8. Wprowadź imiona i numery telefonu do maksymalnie trzech kontaktów, które mają otrzymać wiadomość alarmową. Każdy kontakt musi zaakceptować wzięcie udziału w ciągu 72 godzin. Kontakty będą „Oczekujące", a system pozostaje nieaktywny, dopóki co najmniej jeden kontakt nie potwierdzi uczestnictwa.

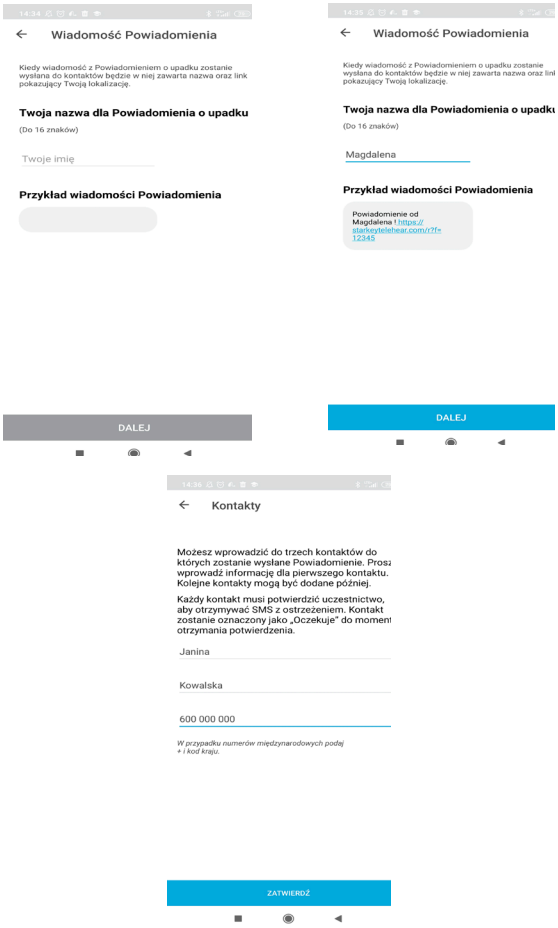

Kontakty


Każdy wprowadzony przez użytkownika kontakt dostanie wiadomość, która wymaga potwierdzenia uczestnictwa w systemie Wykrywania upadku i powiadomień. Uczestnik może być kontaktem dla więcej niż jednego użytkownika aparatów AI.

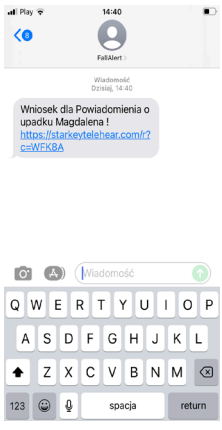


Kliknij w link w zaproszeniu z wiadomości tekstowej.



Wpisz swój numer telefonu w celu weryfikacji.

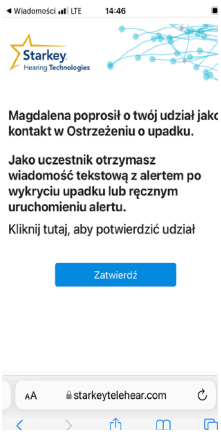

Wybierz "Potwierdzam" w celu potwierdzenia uczestnictwa i systemie

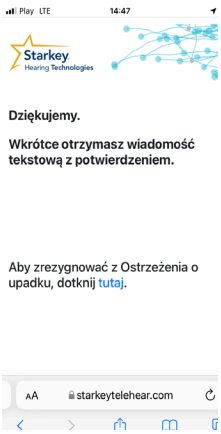


Osoby kontaktowe dostaną wiadomość potwierdzającą uczestnictwo.

Audibel logo, Audibel, Thrive and Arc are trademarks of Audibel Laboratories, Inc. Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. andother countries. Android is a trademark of Google LLC.
©2021 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 8/21 FLYR3875-00-EE-AB

Aktywacja systemu

Potwierdzenie uczestnictwa przynajmniej jednego z kontaktów jest wymagana do aktywacji systemu. Baner na ekranie Powiadamiania o upadku zmieni się na zielony i pojawi się napis "System aktywny". Gdy kontakt potwierdzi udział, „Oczekuje” znika przy ich imieniu.

Gdy funkcja Powiadomienie o upadku jest aktywna, upadek może być automatycznie wykryty lub można zainicjować alert manualny.

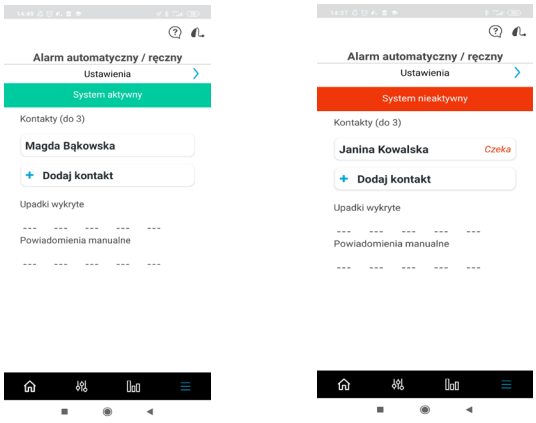

Inne

Powiadomienia o upadku są jedynie narzędziem, które może pomóc w przekazywaniu pewnych informacji do jednego lub więcej kontaktów zewnętrznych wskazanych przez użytkownika. Aplikacja Thrive Hearing Control nie komunikuje się ze służbami ratowniczymi ani w żaden sposób nie zapewnia pomocy w nagłych wypadkach i nie zastępuje kontaktu z profesjonalnymi służbami ratowniczymi.
Działanie funkcji wykrywania upadku w aplikacji Thrive zależy od łączności bezprzewodowej zarówno użytkownika, jak i wyznaczonych przez niego kontaktów, a funkcja ta nie zadziała skutecznie i nie dostarczy wiadomości w sytuacji utraty łączności Bluetooth lub, gdy sygnał łączności z sieci komórkowej zostanie zgubiony lub przerwany w dowolnym momencie na ścieżce komunikacyjnej.
Łączność może zostać utracona z wielu powodowi, takich jak: sparowane urządzenie mobilne jest poza zasięgiem aparatów słuchowych lub w inny sposób traci łączność z aparatami słuchowymi; aparaty słuchowe lub urządzenie mobilne nie jest włączone lub nie jest wystarczająco zasilane; urządzenie mobilne jest w trybie samolotowym; wystąpiła awaria urządzenia mobilnego; lub jeśli zła pogoda powoduje przerwy w łączności sieciowej urządzenia mobilnego.

Funkcja Powiadamiania o upadku, to Produkt General Wellness (Nieregulowany jako Urządzenie medyczne). Funkcja Powiadamiania o upadku jest zaprojektowana i dystrybuowany jako produkt General Wellness. Funkcja ta nie została zaprojektowana ani w żaden sposób nie jest przeznaczona do wykrywania, diagnozowania, leczenia lub zapobiegania określonej chorobie lub konkretnemu stanowi medycznemu i nie jest ukierunkowana na żadną konkretną

Audibel logo, Audibel, Thrive and Arc are trademarks of Audibel Laboratories, Inc. Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. andother countries. Android is a trademark of Google LLC.
©2021 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 8/21 FLYR3875-00-EE-AB

lub szczególną grupę osób. Opisywana funkcja ma na celu wyłącznie wykrycie, że użytkownik mógł upaść i próbę wysłania wiadomości tekstowej w odpowiedzi na takie zdarzenie, wspierając w ten sposób ogólny stan zdrowia użytkownika.
Łączność może zostać utracona z wielu powodów takich jak: sparowane urządzenie mobilne jest poza zasięgiem aparatów słuchowych lub w inny sposób traci łączność z aparatami słuchowymi; aparaty słuchowe lub urządzenie mobilne nie jest włączone lub nie jest wystarczająco zasilane; urządzenie mobilne jest w trybie samolotowym; wystąpiła awaria urządzenia mobilnego; lub jeśli zła pogoda powoduje przerwy w łączności sieciowej urządzenia mobilnego.

Audibel logo, Audibel, Thrive and Arc are trademarks of Audibel Laboratories, Inc. Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. andother countries. Android is a trademark of Google LLC.
©2021 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 8/21 FLYR3875-00-EE-AB